

肌や髪に悩む、あなたのチカラに。

for your skin

BRAND MISSION

私たちはDermaroller GmbH(ドイツ)の日本正規代理店です。

Dermaroller GmbH(ドイツ)は、マイクロニードリングという新しいスキンケアコンセプトを生み出したパイオニアであり、ダーマローラーの開発者です。

最先端の医療現場でも活用されているマイクロニードリング用のダーマローラーを、ご自宅でも使えるエイジングケア製品としてあなたの肌へお届けいたします。

私達のミッションは「肌」や「髪」に悩む皆様のチカラになることです。

ダーマローラーは、Dermaroller GmbHにて開発された技術です。(国際公開第2002/049711号)
Dermaroller(ダーマローラー)は、Dermaroller GmbHの登録商標です。(商標登録第6632768号)
ダーマローラーHC902は医療機器です。(医療機器届出番号:17B2X10006000001)



ACTION

マイクロニードリングの作用

マイクロニードリングとは、微細な針で皮膚に無数の孔を開け、皮膚へのダメージを最小限に抑える一方で、皮膚内では損傷を認め、傷跡を残さずに創傷治癒により皮膚の再生を促したり、有効成分の経皮送達(ドラッグデリバリー)システムとしても広く使用されている療法です。

コラーゲン誘発療法

「弾力、みずみずしさ、リフトアップ、ハリツヤ」など



コラーゲン誘発療法(CIT)は、皮膚の外層に穴を開け、修復プロセスを活性化させるスキントリートメントです。線維芽細胞が活性化し、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸を大量に生成します。また、筋線維芽細胞が収縮し、引き締め効果を高めます。

出典: Plastic and Reconstructive Surgery, 2008, Vol.121(4), pp.1421-1429 マイクロニードリングに関するコラーゲン誘発療法の要約

皮膚細胞増殖

「キメ・小じわ・シミ・くすみの改善・毛穴の収縮」など



表皮と真皮の間にある基底層を刺激することで細胞分裂が活性化され、ターンオーバーを促進します。

出典: Journal of the American College of Clinical Wound Specialists, March 2012, Vol.4(1), pp.2-6 マイクロニードリングによる皮膚細胞の増殖

血管拡張・血管新生

「トーンアップ、肌トラブル改善、ニキビ跡の改善、瘢痕(傷跡)の改善、毛髪再生」など




微細な創傷治癒の過程で、血管拡張物質の産出(血管拡張)や血管内皮細胞分裂の促進(血管新生)が起こります。血管拡張による血液循環の改善や血管新生による積極的な創傷治癒を促します。

出典: Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 2009, Vol.2(1), p.26-30 瘢痕に対するマイクロニードリング療法の評価

経皮吸収

「皮膚への浸透力が大幅に向上」

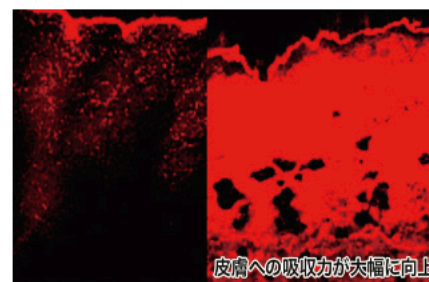

作用物質が皮膚を経由して体内に吸収される率はきわめて低く、角質層の防御によりそのほとんどが阻止されてしまいます。マールブルグ大学やイエナ大学は、小さなリポソームでさえ、12時間の間にわずか0.3%しか皮膚に浸透しないという証拠を示しています。一方、ダーマローラーで処理すると、有効成分の浸透量は1,000%以上増加することが証明されております。

出典: University study, 2000, Marburg (Germany) ダーマローラーによる経皮吸収の有効性を証明

専用
クリーナー
付き

ダーマローラー HC902

1本 / 価格 15,400円 (税込)

*使用目安：使用開始後3ヶ月



ダーマローラーは、Dermaroller GmbHにて開発された技術です。

162本の鍼長0.2mm～0.3mmで極小(最大線径0.08mm)の

医療グレードステンレス製マイクロニードルが90度の角度で当たることで、

肌を傷つけることなく、肌再生を促し、有効成分が最適に吸収されるよう設計されております。

*ダーマローラーの開発企業Dermaroller GmbH(ドイツ)製の正規品になります。(国際公開第2002/049711号)

HOW TO DERMAROLLER | 週2～3日のナイトケアで肌再生を促す

STEP
1

洗顔 / FACE WASH /

メイクを落とした後、洗顔して水分を丁寧にふき取ってください。

STEP
2

マイクロニードリング / MICRONEEDLING /

ダーマローラーHC902をやさしい圧力で水平方向、垂直方向、斜め左右方向へ2～3回に転がすと、均一なパターンが得られます。

大きな領域に使用するときには、いくつかの小さな領域に分割することで均一な効果が得られます。

※1週間以上使用されていない場合には、使用前にローラーをクリーニングしてしっかりと乾燥させてからご使用ください。

STEP
3

回復 / RECOVERY /

使用直後は炎症が起こっているため、お肌の回復と感染予防のために10～15分間休ませてください。

STEP
4

ローラークリーニング / ROLLER CLEANING /

お湯ですすぎ、しっかり水切りします。

専用のローラークリーナーを4回程度均等にスプレーし、プラスチックケースに収納し乾燥させます。

STEP
5

保湿+有効成分 / SKIN CARE /

適切なケア製品を使用してください。

*衛生上の理由から他人との共有は厳禁ですのでご注意ください。

*18歳以上の成人の健康な肌にもみ使用することを前提としております。にきびや湿疹などがある場合はご使用をお控えください。

*ダーマローラーを正しくお使いになれば50回以上使用可能ですが、使用開始後は3ヶ月を目安に交換するようにしてください。

*マイクロニードリングのコラーゲン誘発を実感するには6ヶ月～12ヶ月が目安になりますので、継続的なケアをおすすめします。

*マイクロニードリング後は、紫外線やフリーラジカルもお肌に浸透しやすくなりますので、ナイトケアもしくは、適切なスキンケアとUV保護を行ってください。

*ダーマローラーはセルフケア以外にはご使用にならないでください。(第三者への使用には医師・はり師免許が必要)

HOW TO



MOVIE

